



Angioline
interventional
device

**КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ
ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**

СОДЕРЖАНИЕ

Синтетические рассасывающиеся
плетеные шовные материалы

- 2** КЛЕОСОРБ
- 14** КЛЕОСОРБ РАПИД
- 18** КЛЕОСОРБ ПЛЮС

Синтетические рассасывающиеся
монофиламентные шовные материалы

- 26** КЛЕОРОН
- 32** КЛЕОКСАН

Синтетические нерассасывающиеся
плетеные шовные материалы

- 38** КЛЕОБОНД
- 44** КЛЕОБОНД XL
- 50** КЛЕОЛОН

Синтетический нерассасывающийся
монофиламентный шовный материал

- 54** КЛЕОПРО

КЛЕОСОРБ

Полиглактин 910

Синтетический рассасывающийся
плетеный шовный материал

КЛЕОСОРБ – синтетический рассасывающийся плетеный хирургический шовный материал из полиглактина 910 с покрытием из полиглактина 370 и стеарата кальция, применяющийся для аппроксимации мягких тканей и наложения лигатур.

Многофиламентная плетеная хирургическая нить обладает хорошими манипуляционными свойствами и надежно фиксирует узлы.

Уменьшение показателя прочности на разрыв в течение срока имплантации и окончательное рассасывание шовного материала КЛЕОСОРБ происходит посредством гидролиза.

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИГЛЫ

Хирургические иглы изготовлены из твердолоконной нержавеющей стали AISI302 и покрыты силиконом.









Хирургические иглы отличаются остротой, прочностью при изгибе и пластичностью, что обеспечивает повышенные стойкость к излому и уровень безопасности.

ПРОФИЛЬ РАССАСЫВАНИЯ

Срок имплантации	Приблизительная остаточная прочность
14 дней	75%
21 день (6-0 USP и больше)	50%
28 дней (6-0 USP и больше)	25%





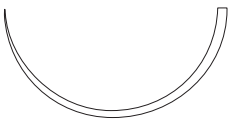
Полное рассасывание шовного материала КЛЕОСОРБ обычно наступает через 70 дней

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)						
		1 (M4)	0 (M3,5)	2-0 (M3)	3-0 (M2)	4-0 (M1,5)	5-0 (M1)	6-0 (M0,7)
⊙ RB-2 (13 мм) 	45						KL6830 ○	KL6820 ○
	45						KM6830 ●	KM6820 ●
	75					KM6843 ●	KM6833 ●	KM6823 ●
⊙ RB-1 (17 мм) 	75					KM6643 ●	KM6633 ●	
⊙ SH-2 (20 мм) 	75				KM7653 ●	KM7643 ●		
⊙ SH-1 (22 мм) 	45				KM7450 ●			
	70				KL7452 ○			
	70				KM7452 ●	KM7442 ●		
	75					KM7443 ●		
⊙ SH (26 мм) 	70		KM7272 ●			KM7242 ●		
	75			KM7263 ●	KM7253 ●			
	90		KM7274 ●			KM7244 ●		
⊙ CT-2 (26 мм) 	70	KM3082 ●						
	90	KM3084 ●		KM3064 ●				
⊙ MH-1 (31 мм) 	75	KM4483 ●	KM4473 ●	KM4463 ●	KM4453 ●			
⊙ MO-5 (31 мм) 	75	KM4883 ●	KM4873 ●					




● – фиолетовая нить ○ – неокрашенная нить

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)			
		2 (M5)	1 (M4)	0 (M3,5)	2-0 (M3)
⊙ МН (36 мм) 	70			KM4372 ●	
	75		KM4383 ●	KM4373 ●	KM4363 ●
	90			KM4374 ●	KM4364 ●
⊙ СТ-1 (36 мм) 	45		KM2980 ●		
	75	KM2993 ●			
	90	KM2994 ●		KL2974 ○	
⊙ СТ (40 мм) 	75	KM2893 ●	KM2883 ●	KM2873 ●	KM2863 ●
	90	KM2894 ●	KM2884 ●	KM2874 ●	
⊙ МО-2 (40 мм) 	70		KM4682 ●	KM4672 ●	KM4662 ●
	75		KM4683 ●	KM4673 ●	KM4663 ●
	90		KM4684 ●	KM4674 ●	
⊙ МО-45 (45 мм) 	75	KM4793 ●	KM4783 ●	KM4773 ●	
	90	KM4794 ●			

● – фиолетовая нить ○ – неокрашенная нить

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)			
		2 (M5)	1 (M4)	0 (M3,5)	2-0 (M3)
 <p>⊙ СТХ (48 мм)</p>	75	KM3493 ●	KM3483 ●	KM3473 ●	
	90			KL3474 ○	
	90	KM3494 ●	KM3484 ●	KM3474 ●	
 <p>⊙ TP-1 (65 мм)</p>	75				KM8263 ●
 <p>⊙ MO-80 (80 мм)</p>	100		KM5085 ●		

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ








































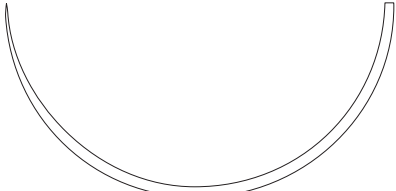


Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)		
		3-0 (M2)	4-0 (M1,5)	5-0 (M1)
 <p>⊙ C-1 (13 мм)</p>	60		KM1141 ●	
 <p>⊙ BB (17 мм)</p>	45		KM0140 ●	

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 5/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)	
		0 (M3,5)	2-0 (M3)
 <p>⊙ UR-5 (36 мм)</p>	70		KM8462 ●
 <p>⊙ UR-4 (40 мм)</p>	75	KM8373 ●	


● – фиолетовая нить ○ – неокрашенная нить

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)					
		2 (M5)	1 (M4)	0 (M3,5)	2-0 (M3)	3-0 (M2)	4-0 (M1,5)
☉ CC-20 (20 мм) 	75					KM1853 	
☉ V-6 (22 мм) 	70					KM9552 	
	75				KM9563 		
☉ V-7 (26 мм) 	75		KM9683 	KM9673 	KM9663 	KM9653 	KM9643 
☉ V-30 (31 мм) 	75		KM8883 	KM8873 	KM8863 	KM8853 	
☉ V-34 (36 мм) 	75	KM8993 	KM8983 	KM8973 	KM8963 		
	90		KM8984 	KM8974 	KM8964 		
☉ V-37 (40 мм) 	75		KL9083 	KL9073 	KL9063 		
	75		KM9083 	KM9073 			
	90		KM9084 	KM9074 	KM9064 		
☉ V-39 (45 мм) 	75	KM9193 	KM9183 	KM9173 	KM9163 		
	90		KM9184 				
☉ V-80 (80 мм) 	75		KM9783 	KM9773 			

● – фиолетовая нить ○ – неокрашенная нить




КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)				
		2-0 (M3)	3-0 (M2)	4-0 (M1,5)	5-0 (M1)	6-0 (M0,7)
▼ V-4 (17 мм) 	75		KL9253 ○		KL9233 ○	

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 5/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)				
		2-0 (M3)	3-0 (M2)	4-0 (M1,5)	5-0 (M1)	6-0 (M0,7)
▼ UV-17 (17 мм) 	75			KL8643 ○		

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)		
		2 (M5)	1 (M4)	0 (M3,5)
▼ OS-4 (22 мм) 	75	KM5193 ●		
▼ CP (40 мм) 	75		KM2583 ●	KM2573 ●
	90		KM2584 ●	KM2574 ●
▼ CPX (48 мм) 	75	KM2793 ●	KM2783 ●	KM2773 ●
	90	KM2794 ●	KM2784 ●	

● – фиолетовая нить ○ – неокрашенная нить

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ






Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)				
		2-0 (M3)	3-0 (M2)	4-0 (M1,5)	5-0 (M1)	6-0 (M0,7)
▼ P-1 (11 мм) 	45				KL5230 ○	KL5220 ○
	45				KM5230 ●	KM5220 ●
▼ PS-3 (16 мм) 	75		KM6453 ●	KM6443 ●	KM6433 ●	
▼ PS-2 (19 мм) 	45		KL6350 ○	KL6340 ○	KL6330 ○	
	45			KM6340 ●		
	75			KL6343 ○		
▼ PS (26 мм) 	45		KL6150 ○			
	45		KM6150 ●			
	75	KL6163 ○	KL6153 ○			
▼ PSLX (36 мм) 	75	KM6563 ●				
▼ LS-1 (45 мм) 	75	KM4163 ●				

● – фиолетовая нить ○ – неокрашенная нить

РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)				
		2-0 (M3)	3-0 (M2)	4-0 (M1,5)	5-0 (M1)	6-0 (M0,7)
▲ PC-22 (22 мм) 	45		KL5650 ○			

РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ



Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)				
		2-0 (M3)	3-0 (M2)	4-0 (M1,5)	5-0 (M1)	6-0 (M0,7)
▲ PC-1 (13 мм) 	45				KL5530 ○	KL5520 ○
▲ PC-3 (16 мм) 	45		KL5850 ○	KL5840 ○	KL5830 ○	
▲ PC-5 (19 мм) 	45		KL5950 ○	KL5940 ○		
	75		KL5953 ○			
▲ PC-26 (26 мм) 	45	KL5760 ○	KL5750 ○	KL5740 ○		
	75	KL5763 ○	KL5753 ○			
▲ PCLX (36 мм) 	75	KL6063 ○	KL6053 ○			

● – фиолетовая нить ○ – неокрашенная нить

РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 5/8 ОКРУЖНОСТИ






Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)				
		2-0 (M3)	3-0 (M2)	4-0 (M1,5)	5-0 (M1)	6-0 (M0,7)
▲ UX-25 (26 мм) 	75		KL8753 ○			
	75		KM8753 ●			

РЕЖУЩАЯ ПРЯМАЯ ИГЛА

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)				
		2-0 (M3)	3-0 (M2)	4-0 (M1,5)	5-0 (M1)	6-0 (M0,7)
▲ KS-55 (55 мм) 	75	KL3963 ○				
▲ KS (60 мм) 	75	KL3863 ○				
	75		KM3853 ●			

● – фиолетовая нить ○ – неокрашенная нить

ТУПОКОНЕЧНАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)			
		2 (M5)	1 (M4)	0 (M3,5)	2-0 (M3)
○ МНВ-1 (31 мм) 	75				KM4563 ●
○ СТВ-1 (36 мм) 	75			KM3373 ●	
	90		KM3384 ●	KM3374 ●	
○ СТВ (40 мм) 	75		KM3283 ●		
	90		KM3284 ●		
○ ВТ-3 (45 мм) 	90	KM0594 ●	KM0584 ●		
○ СТХВ (48 мм) 	90		KM3584 ●		

ТУПОКОНЕЧНАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)		
		2 (M5)	1 (M4)	0 (M3,5)
○ ВР-5 (65 мм) 	100		KM0285 ●	

● – фиолетовая нить ○ – неокрашенная нить

БЕЗ ИГЛЫ (ЛИГАТУРА)

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)								
		2 (M5)	1 (M4)	0 (M3,5)	2-0 (M3)	3-0 (M2)	4-0 (M1,5)	5-0 (M1)	6-0 (M0,7)	7-0 (M0,5)
БЕЗ ИГЛЫ	45	KM0090 ●	KM0080 ●	KM0070 ●	KM0060 ●	KM0050 ●	KM0040 ●	KM0030 ●	KM0020 ●	KM0010 ●
	60	KM0091 ●	KM0081 ●	KM0071 ●	KM0061 ●	KM0051 ●	KM0041 ●	KM0031 ●	KM0021 ●	KM0011 ●
	70	KM0092 ●	KM0082 ●	KM0072 ●	KM0062 ●	KM0052 ●	KM0042 ●	KM0032 ●	KM0022 ●	KM0012 ●
	75	KM0093 ●	KM0083 ●	KM0073 ●	KM0063 ●	KM0053 ●	KM0043 ●	KM0033 ●	KM0023 ●	KM0013 ●
	90	KM0094 ●	KM0084 ●	KM0074 ●	KM0064 ●	KM0054 ●	KM0044 ●	KM0034 ●	KM0024 ●	KM0014 ●
	150	KM0097 ●	KM0087 ●	KM0077 ●	KM0067 ●	KM0057 ●	KM0047 ●	KM0037 ●	KM0027 ●	KM0017 ●
	180	KM0098 ●	KM0088 ●	KM0078 ●	KM0068 ●	KM0058 ●	KM0048 ●	KM0038 ●	KM0028 ●	KM0018 ●
	250	KM0099 ●	KM0089 ●	KM0079 ●	KM0069 ●	KM0059 ●	KM0049 ●	KM0039 ●	KM0029 ●	KM0019 ●

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)								
		2 (M5)	1 (M4)	0 (M3,5)	2-0 (M3)	3-0 (M2)	4-0 (M1,5)	5-0 (M1)	6-0 (M0,7)	7-0 (M0,5)
БЕЗ ИГЛЫ	45	KL0090 ○	KL0080 ○	KL0070 ○	KL0060 ○	KL0050 ○	KL0040 ○	KL0030 ○	KL0020 ○	KL0010 ○
	60	KL0091 ○	KL0081 ○	KL0071 ○	KL0061 ○	KL0051 ○	KL0041 ○	KL0031 ○	KL0021 ○	KL0011 ○
	70	KL0092 ○	KL0082 ○	KL0072 ○	KL0062 ○	KL0052 ○	KL0042 ○	KL0032 ○	KL0022 ○	KL0012 ○
	75	KL0093 ○	KL0083 ○	KL0073 ○	KL0063 ○	KL0053 ○	KL0043 ○	KL0033 ○	KL0023 ○	KL0013 ○
	90	KL0094 ○	KL0084 ○	KL0074 ○	KL0064 ○	KL0054 ○	KL0044 ○	KL0034 ○	KL0024 ○	KL0014 ○
	150	KL0097 ○	KL0087 ○	KL0077 ○	KL0067 ○	KL0057 ○	KL0047 ○	KL0037 ○	KL0027 ○	KL0017 ○
	180	KL0098 ○	KL0088 ○	KL0078 ○	KL0068 ○	KL0058 ○	KL0048 ○	KL0038 ○	KL0028 ○	KL0018 ○
	250	KL0099 ○	KL0089 ○	KL0079 ○	KL0069 ○	KL0059 ○	KL0049 ○	KL0039 ○	KL0029 ○	KL0019 ○

● – фиолетовая нить ○ – неокрашенная нить

КЛЕОСОРБ РАПИД

Полиглактин 910

Синтетический рассасывающийся
плетеный шовный материал

КЛЕОСОРБ РАПИД – синтетический быстрорассасывающийся плетеный хирургический шовный материал из полиглактина 910 с покрытием из полиглактина 370 и стеарата кальция. Характерная быстрая потеря прочности на разрыв является результатом использования полимера с более низкой молекулярной массой, чем в обычном шовном материале КЛЕОСОРБ.





НИЗКИЙ ПРОФИЛЬ РАССАСЫВАНИЯ

Уменьшение показателя прочности на разрыв в течение срока имплантации и окончательное рассасывание шовного материала КЛЕОСОРБ РАПИД происходит посредством гидролиза.




Срок имплантации	Приблизительная остаточная прочность
5 дней	50%

Полное рассасывание шовного материала КЛЕОСОРБ РАПИД обычно наступает через 42 дня

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)			
		2-0 (M3)	3-0 (M2)	4-0 (M1,5)	5-0 (M1)
⊙ RB-1 (17 мм) 	75			KR6643 ○	KR6633 ○
⊙ SH-1 (22 мм) 	75		KR7453 ○		
⊙ CT-2 (26 мм) 	70	KR3062 ○			
⊙ MH-1 (31 мм) 	75	KR4463 ○			

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)		
		1 (M4)	0 (M3,5)	2-0 (M3)
▼ V-34 (36 мм) 	90	KR8984 ○	KR8974 ○	KR8964 ○
▼ V-37 (40 мм) 	90			KR9064 ○
▼ V-39 (45 мм) 	90		KR9174 ○	

○ – неокрашенная нить

КЛЕОСОРБ РАПИД


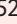
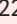

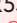
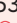


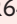
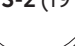


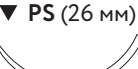


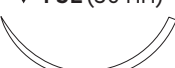

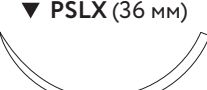


КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 5/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)		
		3-0 (M2)	4-0 (M1,5)	5-0 (M1)
▼ UV-17 (17 мм) 	75		KR8643 	

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)		
		0 (M3,5)	2-0 (M3)	3-0 (M2)
▼ CP-2 (26 мм) 	75		KR2663 	

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)				
		2-0 (M3)	3-0 (M2)	4-0 (M1,5)	5-0 (M1)	6-0 (M0,7)
▼ P-1 (11 мм) 	45				KR5230 	KR5220 
▼ P-3 (13 мм) 	45			KR5340 	KR5330 	
▼ PS-3 (16 мм) 	75		KR6453 	KR6443 		
▼ PS-2 (19 мм) 	75		KR6353 	KR6343 		
▼ PS (26 мм) 	75	KR6163 	KR6153 			
▼ FSL (30 мм) 	75		KR3653 			
▼ PSLX (36 мм) 	75	KR6563 	KR6553 			

○ – неокрашенная нить

РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)	
		3-0 (M2)	4-0 (M1,5)
▲ PC-22 (22 мм) 	45	KR5650 ○	KR5640 ○

РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)	
		3-0 (M2)	4-0 (M1,5)
▲ PC-3 (16 мм) 	75	KR5853 ○	KR5843 ○
▲ PC-26 (26 мм) 	75	KR5753 ○	KR5743 ○

БЕЗ ИГЛЫ (ЛИГАТУРА)

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)						
		1 (M4)	0 (M3,5)	2-0 (M3)	3-0 (M2)	4-0 (M1,5)	5-0 (M1)	6-0 (M0,7)
БЕЗ ИГЛЫ	45	KR0080 ○	KR0070 ○	KR0060 ○	KR0050 ○	KR0040 ○	KR0030 ○	KR0020 ○
	60	KR0081 ○	KR0071 ○	KR0061 ○	KR0051 ○	KR0041 ○	KR0031 ○	KR0021 ○
	70	KR0082 ○	KR0072 ○	KR0062 ○	KR0052 ○	KR0042 ○	KR0032 ○	KR0022 ○
	2x70	KR0086 ○	KR0076 ○	KR0066 ○	KR0056 ○	KR0046 ○	KR0036 ○	KR0026 ○
	75	KR0083 ○	KR0073 ○	KR0063 ○	KR0053 ○	KR0043 ○	KR0033 ○	KR0023 ○
	90	KR0084 ○	KR0074 ○	KR0064 ○	KR0054 ○	KR0044 ○	KR0034 ○	KR0024 ○
	150	KR0087 ○	KR0077 ○	KR0067 ○	KR0057 ○	KR0047 ○	KR0037 ○	KR0027 ○
	180	KR0088 ○	KR0078 ○	KR0068 ○	KR0058 ○	KR0048 ○	KR0038 ○	KR0028 ○
	250	KR0089 ○	KR0079 ○	KR0069 ○	KR0059 ○	KR0049 ○	KR0039 ○	KR0029 ○

○ – неокрашенная нить

КЛЕОСОРБ ПЛЮС

Полиглактин 910 с антисептиком
Синтетический рассасывающийся
плетеный шовный материал

КЛЕОСОРБ ПЛЮС – синтетический рассасывающийся плетеный хирургический шовный материал из полиглактина 910 с антисептиком и покрытием из полиглактина 370 и стеарата кальция.

Уменьшение показателя прочности на разрыв в течение срока имплантации и окончательное рассасывание шовного материала КЛЕОСОРБ ПЛЮС происходит посредством гидролиза.











ПРОФИЛЬ РАССАСЫВАНИЯ

Срок имплантации	Приблизительная остаточная прочность
14 дней	75%
21 день	50%
28 дней	25%

Срок полного рассасывания ~ 70 дней





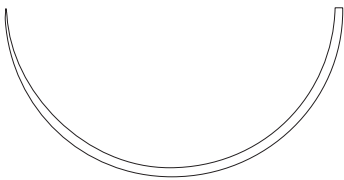
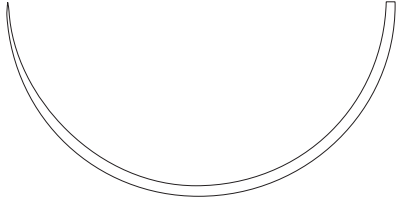
Шовный материал КЛЕОСОРБ ПЛЮС подавляет колонизацию шовного материала бактериями *Staphylococcus aureus* и *Staphylococcus epidermidis*.

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)						
		2 (M5)	1 (M4)	0 (M3,5)	2-0 (M3)	3-0 (M2)	4-0 (M1,5)	5-0 (M1)
⊙ RB-2 (13 мм) 	45							KI6830 ○
	70						KI6842 ○	KI6832 ○
⊙ TF (13 мм) 	70						KB8042 ●	
⊙ RB-1 (17 мм) 	70						KI6642 ○	
	70				KB6662 ●	KB6652 ●	KB6642 ●	KB6632 ●
	75					KB6653 ●		
⊙ CT-3 (22 мм) 	70				KB3162 ●			
⊙ SH-1 (22 мм) 	70				KB7462 ●	KB7452 ●	KB7442 ●	
	75					KB7453 ●		
⊙ MO-7 (22 мм) 	75	KB4993 ●	KB4983 ●					
⊙ SH (26 мм) 	75			KB7273 ●	KB7263 ●	KB7253 ●	KB7243 ●	
	90			KB7274 ●		KB7254 ●		
⊙ CT-2 (26 мм) 	90		KB3084 ●	KB3074 ●	KB3064 ●			
⊙ MH-1 (31 мм) 	70		KB4482 ●	KB4472 ●	KB4462 ●	KB4452 ●		
⊙ MH (36 мм) 	70		KB4382 ●	KB4372 ●	KB4362 ●	KB4352 ●		

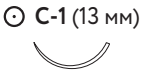





● – фиолетовая нить ○ – неокрашенная нить

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ




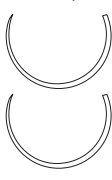





Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)			
		2 (M5)	1 (M4)	0 (M3,5)	2-0 (M3)
⊙ СТ-1 (36 мм) 	90	KB2994 ●	KB2984 ●	KB2974 ●	KB2964 ●
⊙ СТ (40 мм) 	70		KB2882 ●	KB2872 ●	KB2862 ●
	90	KB2894 ●	KB2884 ●	KB2874 ●	
⊙ МО-45 (45 мм) 	70	KB4792 ●	KB4782 ●		
⊙ СТХ (48 мм) 	90	KB3494 ●	KB3484 ●	KB3474 ●	
⊙ XLH (70 мм) 	120		KB9886 ●		
⊙ МО-80 (80 мм) 	100		KB5085 ●		

● – фиолетовая нить ○ – неокрашенная нить

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ








Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)	
		2-0 (M3)	4-0 (M1,5)
 <p>⊙ C-1 (13 мм)</p>	70		KB1142 
 <p>⊙ BB (17 мм)</p>	45		KB0140 
 <p>⊙ TE (30 мм)</p>	70	KB7962 	

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 5/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)		
		0 (M3,5)	2-0 (M3)	3-0 (M2)
 <p>⊙ UR-6 (27 мм)</p>	70	KB8572 	KB8562 	
 <p>⊙ UR-6 (27 мм)</p>	90		KB8564D 	
 <p>⊙ MF (31 мм)</p>	70			K14252 
 <p>⊙ UR-5 (36 мм)</p>	70	KB8472 		

● – фиолетовая нить ○ – неокрашенная нить

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ


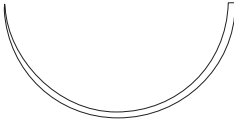
Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)					
		2 (M5)	1 (M4)	0 (M3,5)	2-0 (M3)	3-0 (M2)	4-0 (M1,5)
▼ V-5 (17 мм) 	70			KB9472 ●			KB9442 ●
▼ V-6 (22 мм) 	70				KB9562 ●		
▼ V-7 (26 мм) 	70				KB9662 ●	KB9652 ●	
▼ V-30 (31 мм) 	70		KB8882 ●	KB8872 ●	KB8862 ●		
▼ V-34 (36 мм) 	90	KB8994 ●	KB8984 ●	KB8974 ●	KB8964 ●	KB8954 ●	
▼ V-37 (40 мм) 	70			KI9072 ○	KI9062 ○		
	90		KB9084 ●				
▼ V-39 (45 мм) 	70	KB9192 ●	KB9182 ●	KB9172 ●	KB9162 ●		

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ



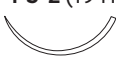
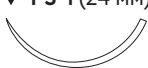

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)	
		3-0 (M2)	4-0 (M1,5)
▼ V-4 (17 мм) 	70	KI9252 ○	KI9242 ○

● – фиолетовая нить ○ – неокрашенная нить

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ





Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)		
		2 (M5)	1 (M4)	0 (M3,5)
▼ CP (40 мм) 	70			KB2572 ●
	90		KB2584 ●	
▼ CPX (48 мм) 	70			KB2772 ●
	90	KB2794 ●	KB2784 ●	

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)				
		0 (M3,5)	2-0 (M3)	3-0 (M2)	4-0 (M1,5)	5-0 (M1)
▼ P-3 (13 мм) 	45				KI5340 ○	KI5330 ○
▼ PS-3 (16 мм) 	45					KI6430 ○
	70			KB6452 ●		
▼ PS-2 (19 мм) 	45			KI6350 ○	KI6340 ○	
	70				KI6342 ○	
	70				KB6342 ●	
▼ PS-1 (24 мм) 	45		KI6260 ○	KI6250 ○		
	70			KI6252 ○		
	70			KB6252 ●		
▼ FSL (30 мм) 	70	KB3672 ●	KB3662 ●	KB3652 ●		

● – фиолетовая нить ○ – неокрашенная нить

РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)	
		2-0 (M3)	3-0 (M2)
▲ PC-3 (16 мм) 	45		K15850 ○
▲ PC-5 (19 мм) 	70		K15952 ○
▲ PC-26 (26 мм) 	70	K15762 ○	
▲ PCLX (36 мм) 	70	K16062 ○	K16052 ○

ТУПОКОНЕЧНАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)		
		1 (M4)	0 (M3,5)	2-0 (M3)
○ СТВ (40 мм) 	90		KB3274 ●	

ТУПОКОНЕЧНАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)		
		2 (M5)	1 (M4)	0 (M3,5)
○ ВР-5 (65 мм) 	100		KB0285 ●	

● – фиолетовая нить ○ – неокрашенная нить

БЕЗ ИГЛЫ (ЛИГАТУРА)

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)						
		2 (M5)	1 (M4)	0 (M3,5)	2-0 (M3)	3-0 (M2)	4-0 (M1,5)	5-0 (M1)
БЕЗ ИГЛЫ	45	KB0090 ●	KB0080 ●	KB0070 ●	KB0060 ●	KB0050 ●	KB0040 ●	KB0030 ●
	60	KB0091 ●	KB0081 ●	KB0071 ●	KB0061 ●	KB0051 ●	KB0041 ●	KB0031 ●
	70	KB0092 ●	KB0082 ●	KB0072 ●	KB0062 ●	KB0052 ●	KB0042 ●	KB0032 ●
	2x70	KB0095 ●	KB0085 ●	KB0075 ●	KB0065 ●	KB0055 ●	KB0045 ●	KB0035 ●
	75	KB0093 ●	KB0083 ●	KB0073 ●	KB0063 ●	KB0053 ●	KB0043 ●	KB0033 ●
	90	KB0094 ●	KB0084 ●	KB0074 ●	KB0064 ●	KB0054 ●	KB0044 ●	KB0034 ●
	150	KB0097 ●	KB0087 ●	KB0077 ●	KB0067 ●	KB0057 ●	KB0047 ●	KB0037 ●
	180	KB0098 ●	KB0088 ●	KB0078 ●	KB0068 ●	KB0058 ●	KB0048 ●	KB0038 ●
	250	KB0099 ●	KB0089 ●	KB0079 ●	KB0069 ●	KB0059 ●	KB0049 ●	KB0039 ●

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)						
		2 (M5)	1 (M4)	0 (M3,5)	2-0 (M3)	3-0 (M2)	4-0 (M1,5)	5-0 (M1)
БЕЗ ИГЛЫ	45	KI0090 ○	KI0080 ○	KI0070 ○	KI0060 ○	KI0050 ○	KI0040 ○	KI0030 ○
	60	KI0091 ○	KI0081 ○	KI0071 ○	KI0061 ○	KI0051 ○	KI0041 ○	KI0031 ○
	70	KI0092 ○	KI0082 ○	KI0072 ○	KI0062 ○	KI0052 ○	KI0042 ○	KI0032 ○
	75	KI0093 ○	KI0083 ○	KI0073 ○	KI0063 ○	KI0053 ○	KI0043 ○	KI0033 ○
	90	KI0094 ○	KI0084 ○	KI0074 ○	KI0064 ○	KI0054 ○	KI0044 ○	KI0034 ○
	150	KI0097 ○	KI0087 ○	KI0077 ○	KI0067 ○	KI0057 ○	KI0047 ○	KI0037 ○
	180	KI0098 ○	KI0088 ○	KI0078 ○	KI0068 ○	KI0058 ○	KI0048 ○	KI0038 ○
	250	KI0099 ○	KI0089 ○	KI0079 ○	KI0069 ○	KI0059 ○	KI0049 ○	KI0039 ○

● – фиолетовая нить ○ – неокрашенная нить

КЛЕОРОН

Полиглекапрон 25

Синтетический рассасывающийся монофиламентный шовный материал

КЛЕОРОН – синтетический рассасывающийся монофиламентный хирургический шовный материал из полиглекапрона 25. Шовный материал КЛЕОРОН характеризуется однородным диаметром с гладкой поверхностью, малой жесткостью и атравматическим прохождением через ткани.

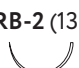
























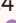
Уменьшение показателя прочности на разрыв в течение срока имплантации и окончательное рассасывание шовного материала КЛЕОРОН происходит посредством гидролиза.

ПРОФИЛЬ РАССАСЫВАНИЯ

Срок имплантации	Приблизительная остаточная прочность
7 дней	50–60%
14 дней	20–30%





Практически полное рассасывание шовного материала КЛЕОРОН завершается через 120 дней

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ



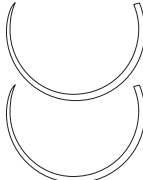

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)					
		1 (M4)	0 (M3,5)	2-0 (M3)	3-0 (M2)	4-0 (M1,5)	6-0 (M0,7)
 RB-2 (13 мм)	45						KC6820 
 RB-1 (17 мм)	70				KC6652 	KC6642 	
 SH-1 (22 мм)	70			KC7462 	KC7452 	KC7442 	
 SH-1 (22 мм)	70				KC7452D 		
 SH (26 мм)	45				KC7250 		
	70			KC7262 	KC7252 		
 SH (26 мм)	70			KC7262D 	KC7252D 		
 MH-1 (31 мм)	70		KC4472 				
 MH (36 мм)	70	KC4382 					
 CT (40 мм)	70		KC2872 				
 MO-45 (45 мм)	90	KC4784 					

● – фиолетовая нить ○ – неокрашенная нить

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ





Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)	
		2-0 (M3)	4-0 (M1,5)
 BB (17 мм)	70		 KC0142
 TE (30 мм)	70	 KC7962	

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 5/8 ОКРУЖНОСТИ



Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)	
		2-0 (M3)	3-0 (M2)
 UR-6 (27 мм)	70		 KC8552D
 UR-5 (36 мм)	70	 KC8462D	

● – фиолетовая нить ○ – неокрашенная нить

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ







Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)		
		0 (M3,5)	2-0 (M3)	3-0 (M2)
▼ V-7 (26 мм) 	70		KC9662 	KG9652 
▼ V-34 (36 мм) 	70	KC8972 	KC8962 	

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)		
		2 (M5)	1 (M4)	0 (M3,5)
▼ CP (40 мм) 	90		KC2584 	

● – фиолетовая нить ○ – неокрашенная нить

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)				
		2-0 (M3)	3-0 (M2)	4-0 (M1,5)	5-0 (M1)	6-0 (M0,7)
▼ P-1 (11 мм) 	45					KG5220 ○
▼ P-3 (13 мм) 	45				KG5330 ○	KG5320 ○
▼ PS-3 (16 мм) 	45			KG6440 ○	KG6430 ○	
▼ PS-2 (19 мм) 	45		KG6350 ○	KG6340 ○		
	70		KG6352 ○		KG6332 ○	
▼ PS (26 мм) 	70	KG6162 ○	KG6152 ○			
▼ PSLX (36 мм) 	70		KG6552 ○			

РЕЖУЩАЯ ПРЯМАЯ ИГЛА

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)		
		2-0 (M3)	3-0 (M2)	4-0 (M1,5)
▲ KS (60 мм) 	70		KG3852 ○	

● – фиолетовая нить ○ – неокрашенная нить

БЕЗ ИГЛЫ (ЛИГАТУРА)

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)						
		1 (M4)	0 (M3,5)	2-0 (M3)	3-0 (M2)	4-0 (M1,5)	5-0 (M1)	6-0 (M0,7)
БЕЗ ИГЛЫ	45	KC0080 ●	KC0070 ●	KC0060 ●	KC0050 ●	KC0040 ●	KC0030 ●	KC0020 ●
	60	KC0081 ●	KC0071 ●	KC0061 ●	KC0051 ●	KC0041 ●	KC0031 ●	KC0021 ●
	70	KC0082 ●	KC0072 ●	KC0062 ●	KC0052 ●	KC0042 ●	KC0032 ●	KC0022 ●
	75	KC0083 ●	KC0073 ●	KC0063 ●	KC0053 ●	KC0043 ●	KC0033 ●	KC0023 ●
	90	KC0084 ●	KC0074 ●	KC0064 ●	KC0054 ●	KC0044 ●	KC0034 ●	KC0024 ●
	150	KC0087 ●	KC0077 ●	KC0067 ●	KC0057 ●	KC0047 ●	KC0037 ●	KC0027 ●
	180	KC0088 ●	KC0078 ●	KC0068 ●	KC0058 ●	KC0048 ●	KC0038 ●	KC0028 ●
	250	KC0089 ●	KC0079 ●	KC0069 ●	KC0059 ●	KC0049 ●	KC0039 ●	KC0029 ●

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)						
		1 (M4)	0 (M3,5)	2-0 (M3)	3-0 (M2)	4-0 (M1,5)	5-0 (M1)	6-0 (M0,7)
БЕЗ ИГЛЫ	45	KG0080 ○	KG0070 ○	KG0060 ○	KG0050 ○	KG0040 ○	KG0030 ○	KG0020 ○
	60	KG0081 ○	KG0071 ○	KG0061 ○	KG0051 ○	KG0041 ○	KG0031 ○	KG0021 ○
	70	KG0082 ○	KG0072 ○	KG0062 ○	KG0052 ○	KG0042 ○	KG0032 ○	KG0022 ○
	75	KG0083 ○	KG0073 ○	KG0063 ○	KG0053 ○	KG0043 ○	KG0033 ○	KG0023 ○
	90	KG0084 ○	KG0074 ○	KG0064 ○	KG0054 ○	KG0044 ○	KG0034 ○	KG0024 ○
	150	KG0087 ○	KG0077 ○	KG0067 ○	KG0057 ○	KG0047 ○	KG0037 ○	KG0027 ○
	180	KG0088 ○	KG0078 ○	KG0068 ○	KG0058 ○	KG0048 ○	KG0038 ○	KG0028 ○
	250	KG0089 ○	KG0079 ○	KG0069 ○	KG0059 ○	KG0049 ○	KG0039 ○	KG0029 ○

● – фиолетовая нить ○ – неокрашенная нить

КЛЕОКСАН

Полидиоксанон

Синтетический рассасывающийся монофиламентный шовный материал

КЛЕОКСАН – синтетический рассасывающийся монофиламентный хирургический шовный материал из полидиоксанона. Шовный материал КЛЕОКСАН характеризуется длительным сроком рассасывания и атравматическим прохождением через ткани.








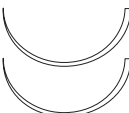

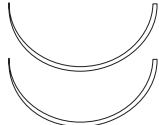
Уменьшение показателя прочности на разрыв в течение срока имплантации и окончательное рассасывание шовного материала КЛЕОКСАН происходит посредством гидролиза.

ПРОФИЛЬ РАССАСЫВАНИЯ

Срок имплантации	Приблизительная остаточная прочность
14 дней	60–80%
28 дней	40–70%
42 дня	35–60%



Практически полное рассасывание шовного материала КЛЕОКСАН завершается через 238 дней

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ





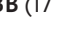
Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)							
		1 (M4)	0 (M3,5)	2-0 (M3)	3-0 (M2)	4-0 (M1,5)	5-0 (M1)	6-0 (M0,7)	7-0 (M0,5)
⊙ TF-6 (6,5 мм) 	70							KX7122	KX7112
⊙ RB-2 (13 мм) 	45					KX6840	KX6830	KX6820	
	75					KX6843	KX6833	KX6823	
⊙ RB-2 (13 мм) 	70						KX6832D		
⊙ RB-1 (17 мм) 	90					KX6644D	KX6634D		
⊙ SH-2 (20 мм) 	70				KX7652	KX7642			
⊙ SH-1 (22 мм) 	70				KX7452D				
	90					KX7444D			
⊙ SH (26 мм) 	70		KX7272	KX7262	KX7252				
	75		KX7273	KX7263	KX7253	KX7243			
⊙ SH (26 мм) 	90				KX7254D	KX7244D			
⊙ MH-1 (31 мм) 	70	KX4482	KX4472	KX4462	KX4452	KX4442			
⊙ MH-1 (31 мм) 	90				KX4454D				

● – фиолетовая нить

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)				
		2 (M5)	1 (M4)	0 (M3,5)	2-0 (M3)	3-0 (M2)
 Ⓞ СТ (40 мм)	70				KX2862 ●	KX2852 ●
	90	KX2894 ●	KX2884 ●			
 Ⓞ СТХ (48 мм)	90	KX3494 ●				

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ






Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)			
		4-0 (M1,5)	5-0 (M1)	6-0 (M0,7)	7-0 (M0,5)
 Ⓞ BV175-6 (8 мм)	23				KX0916 ●
 Ⓞ BV-1 (9,3 мм)	70			KX0722D ●	KX0712D ●
 Ⓞ BV (11 мм)	70			KX0622D ●	
 Ⓞ C-1 (13 мм)	45			KX1120D ●	KX1110D ●
 Ⓞ BB (17 мм)	70	KX0142 ●	KX0132 ●		

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА С У ЗАТОЧКОЙ, 3/8 ОКРУЖНОСТИ



Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)			
		4-0 (M1,5)	5-0 (M1)	6-0 (M0,7)	7-0 (M0,5)
 Ⓞ CC (9,3 мм)	70			KX1322D ●	KX1312D ●
 Ⓞ CC-1 (13 мм)	60			KX1521D ●	

● – фиолетовая нить

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)			
		1 (M4)	0 (M3,5)	2-0 (M3)	3-0 (M2)
▼ V-7 (26 мм) 	70			KX9662 ●	KX9652 ●
▼ V-34 (36 мм) 	70			KX8962 ●	
	90	KX8984 ●	KX8974 ●		
▼ V-37 (40 мм) 	90	KX9084 ●	KX9074 ●		
▼ V-39 (45 мм) 	90	KX9184 ●	KX9174 ●		
▼ V-40 (48 мм) 	90	KX9384 ●			

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)	
		1 (M4)	4-0 (M1,5)
▼ CP-2 (26 мм) 	45		KX2640 ●
▼ CPX (48 мм) 	90	KX2784 ●	

● – фиолетовая нить

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)		
		3-0 (M2)	4-0 (M1,5)	6-0 (M0,7)
▼ P-6 (8 мм) 	45			KX5420 ●
▼ PS-2 (19 мм) 	45		KX6340 ●	
▼ PS (26 мм) 	45	KX6150 ●		

РЕЖУЩАЯ, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)		
		2-0 (M3)	3-0 (M2)	4-0 (M1,5)
▲ PC-22 (22 мм) 	45		KX5650 ●	

РЕЖУЩАЯ, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)			
		3-0 (M2)	4-0 (M1,5)	5-0 (M1)	6-0 (M0,7)
▲ PC-1 (13 мм) 	45				KX5520 ●
▲ PC-3 (16 мм) 	45		KX5840 ●	KX5830 ●	
	70			KX5832 ●	
▲ PC-5 (19 мм) 	45		KX5940 ●		
▲ PC-26 (26 мм) 	70	KX5752 ●			

● – фиолетовая нить

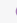











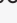
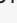


























































РЕЖУЩАЯ ПРЯМАЯ ИГЛА

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)		
		2-0 (M3)	3-0 (M2)	4-0 (M1,5)
 <p>▲ KS (60 мм)</p>	70		KX3852 	

ТУПОКОНЕЧНАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)		
		2 (M5)	1 (M4)	0 (M3,5)
 <p>○ BP-5 (65 мм)</p>	90		KX0284 	

БЕЗ ИГЛЫ (ЛИГАТУРА)

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)								
		2 (M5)	1 (M4)	0 (M3,5)	2-0 (M3)	3-0 (M2)	4-0 (M1,5)	5-0 (M1)	6-0 (M0,7)	7-0 (M0,5)
БЕЗ ИГЛЫ	45	KX0090 	KX0080 	KX0070 	KX0060 	KX0050 	KX0040 	KX0030 	KX0020 	KX0010 
	60	KX0091 	KX0081 	KX0071 	KX0061 	KX0051 	KX0041 	KX0031 	KX0021 	KX0011 
	70	KX0092 	KX0082 	KX0072 	KX0062 	KX0052 	KX0042 	KX0032 	KX0022 	KX0012 
	75	KX0093 	KX0083 	KX0073 	KX0063 	KX0053 	KX0043 	KX0033 	KX0023 	KX0013 
	90	KX0094 	KX0084 	KX0074 	KX0064 	KX0054 	KX0044 	KX0034 	KX0024 	KX0014 
	150	KX0097 	KX0087 	KX0077 	KX0067 	KX0057 	KX0047 	KX0037 	KX0027 	KX0017 
	180	KX0098 	KX0088 	KX0078 	KX0068 	KX0058 	KX0048 	KX0038 	KX0028 	KX0018 
	250	KX0099 	KX0089 	KX0079 	KX0069 	KX0059 	KX0049 	KX0039 	KX0029 	KX0019 

● – фиолетовая нить




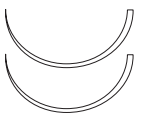


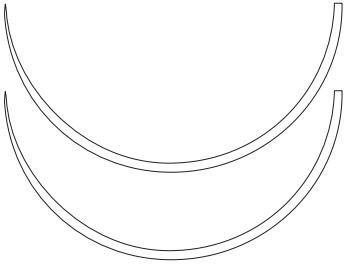
КЛЕОБОНД

Полиэстер с покрытием
(силикон)

Синтетический
нерассасывающийся
плетеный шовный материал

КЛЕОБОНД – синтетический нерассасывающийся плетеный хирургический шовный материал из полиэстера с покрытием из силикона. Шовный материал КЛЕОБОНД характеризуется постоянной прочностью на разрыв и хорошими манипуляционными свойствами. Покрытие из силикона придает шовному материалу гладкость и облегчает прохождение через ткани.

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ



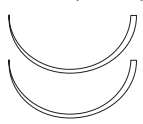
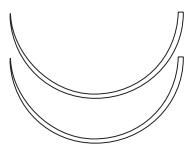
Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)				
		0 (M3,5)	2-0 (M3)	3-0 (M2)	4-0 (M1,5)	5-0 (M1)
⊙ RB-1 (17 мм) 	60			KD6651D ●		KD6631D ●
	90		KD6664D ●			
⊙ SH-2 (20 мм) 	75		KV7663D ○		KV7643D ○	
	75		KD7663D ●		KD7643D ●	
⊙ SH (26 мм) 	75			KV7253 ○	KV7243 ○	
	75			KD7253 ●	KD7243 ●	
⊙ SH (26 мм) 	75		KV7263D ○			
	75		KD7263D ●			
	90		KD7264D ●			
	100			KD7255D ●		
⊙ MH-1 (31 мм) 	75	KD4473 ●	KD4463 ●	KD4453 ●		
⊙ MH (36 мм) 	75		KD4363 ●			
⊙ XLH (70 мм) 	75	KD9873D ●				

● – зеленая нить ○ – белая нить

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)		
		4-0 (M1,5)	5-0 (M1)	6-0 (M0,7)
 <p>☉ C-1 (13 мм)</p>	75	KD1143D ●	KD1133D ●	

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)				
		0 (M3,5)	2-0 (M3)	3-0 (M2)	4-0 (M1,5)	5-0 (M1)
 <p>☉ V-5 (17 мм)</p>	75		KV9463D ○			
	75		KD9463D ●			
	90		KV9464D ○		KV9444D ○	
	90		KD9464D ●	KD9454D ●	KD9444D ●	KD9434D ●
 <p>☉ V-6 (22 мм)</p>	75		KV9563D ○			
	75		KD9563D ●			
 <p>☉ V-7 (26 мм)</p>	75		KV9663D ○			
	75		KD9663D ●	KD9653D ●		
	90		KV9664D ○			
	90	KD9674D ●	KD9664D ●	KD9654D ●		
 <p>☉ V-34 (36 мм)</p>	90		KD8964D ●			

● – зеленая нить ○ – белая нить

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)		
		2 (M5)	1 (M4)	0 (M3,5)
▼ OS-4 (22 мм) 	75		KD5183 ●	

РЕЖУЩАЯ ПРЯМАЯ ИГЛА

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)		
		0 (M3,5)	2-0 (M3)	3-0 (M2)
▲ KS (60 мм) 	75		KD3863 ●	

БЕЗ ИГЛЫ (ЛИГАТУРА)

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)							
		2 (M5)	1 (M4)	0 (M3,5)	2-0 (M3)	3-0 (M2)	4-0 (M1,5)	5-0 (M1)	6-0 (M0,7)
БЕЗ ИГЛЫ	45	KD0090 ●	KD0080 ●	KD0070 ●	KD0060 ●	KD0050 ●	KD0040 ●	KD0030 ●	KD0020 ●
	60	KD0091 ●	KD0081 ●	KD0071 ●	KD0061 ●	KD0051 ●	KD0041 ●	KD0031 ●	KD0021 ●
	70	KD0092 ●	KD0082 ●	KD0072 ●	KD0062 ●	KD0052 ●	KD0042 ●	KD0032 ●	KD0022 ●
	75	KD0093 ●	KD0083 ●	KD0073 ●	KD0063 ●	KD0053 ●	KD0043 ●	KD0033 ●	KD0023 ●
	90	KD0094 ●	KD0084 ●	KD0074 ●	KD0064 ●	KD0054 ●	KD0044 ●	KD0034 ●	KD0024 ●
	150	KD0097 ●	KD0087 ●	KD0077 ●	KD0067 ●	KD0057 ●	KD0047 ●	KD0037 ●	KD0027 ●
	180	KD0098 ●	KD0088 ●	KD0078 ●	KD0068 ●	KD0058 ●	KD0048 ●	KD0038 ●	KD0028 ●
	250	KD0099 ●	KD0089 ●	KD0079 ●	KD0069 ●	KD0059 ●	KD0049 ●	KD0039 ●	KD0029 ●

● – зеленая нить

БЕЗ ИГЛЫ (ЛИГАТУРА)

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)							
		2 (M5)	1 (M4)	0 (M3,5)	2-0 (M3)	3-0 (M2)	4-0 (M1,5)	5-0 (M1)	6-0 (M0,7)
БЕЗ ИГЛЫ	45	KV0090 ○	KV0080 ○	KV0070 ○	KV0060 ○	KV0050 ○	KV0040 ○	KV0030 ○	KV0020 ○
	60	KV0091 ○	KV0081 ○	KV0071 ○	KV0061 ○	KV0051 ○	KV0041 ○	KV0031 ○	KV0021 ○
	70	KV0092 ○	KV0082 ○	KV0072 ○	KV0062 ○	KV0052 ○	KV0042 ○	KV0032 ○	KV0022 ○
	75	KV0093 ○	KV0083 ○	KV0073 ○	KV0063 ○	KV0053 ○	KV0043 ○	KV0033 ○	KV0023 ○
	90	KV0094 ○	KV0084 ○	KV0074 ○	KV0064 ○	KV0054 ○	KV0044 ○	KV0034 ○	KV0024 ○
	150	KV0097 ○	KV0087 ○	KV0077 ○	KV0067 ○	KV0057 ○	KV0047 ○	KV0037 ○	KV0027 ○
	180	KV0098 ○	KV0088 ○	KV0078 ○	KV0068 ○	KV0058 ○	KV0048 ○	KV0038 ○	KV0028 ○
	250	KV0099 ○	KV0089 ○	KV0079 ○	KV0069 ○	KV0059 ○	KV0049 ○	KV0039 ○	KV0029 ○

○ – белая нить

КЛЕОБОНД XL

Полиэстер с покрытием
(полибутиллат или этилцеллюлоза)

Синтетический
нерассасывающийся
плетеный шовный материал




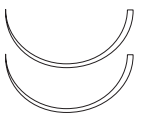


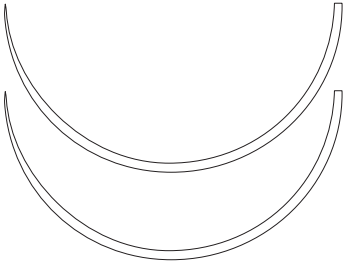
КЛЕОБОНД XL – синтетический нерассасывающийся плетеный хирургический шовный материал из полиэстера с покрытием из полибутиллата или этилцеллюлозы. Шовный материал КЛЕОБОНД XL обеспечивает постоянную прочность на разрыв и обладает хорошими манипуляционными свойствами. Покрытие придает шовному материалу гладкость и облегчает прохождение через ткани.

ПРОКЛАДКИ PTFE

Шовный материал КЛЕОБОНД XL может поставляться с прокладками из политетрафторэтилена (PTFE).

Прокладки предназначены для профилактики прорезывания швов через смежные ткани, они увеличивают область несущей нагрузки между швом и поверхностью тканей.

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)				
		0 (M3,5)	2-0 (M3)	3-0 (M2)	4-0 (M1,5)	5-0 (M1)
⊙ RB-1 (17 мм) 	60			KE6651D ●		KE6631D ●
	90		KE6664D ●			
⊙ SH-2 (20 мм) 	75		KS7663D ○		KS7643D ○	
	75		KE7663D ●		KE7643D ●	
⊙ SH (26 мм) 	75			KS7253 ○	KS7243 ○	
	75			KE7253 ●	KE7243 ●	
⊙ SH (26 мм) 	75		KS7263D ○			
	75		KE7263D ●			
	90		KE7264D ●			
	100			KE7255D ●		
⊙ MH-1 (31 мм) 	75	KE4473 ●	KE4463 ●	KE4453 ●		
⊙ MH (36 мм) 	75		KE4363 ●			
⊙ XLH (70 мм) 	75	KE9873D ●				





* В таблицах указаны коды шовного материала КЛЕОБОНД XL с покрытием из полибутилата. Для заказа шовного материала КЛЕОБОНД XL с покрытием из этилцеллюлозы следует заменить KE на KH, KS на KJ.

● – зеленая нить ○ – белая нить

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)		
		4-0 (M1,5)	5-0 (M1)	6-0 (M0,7)
 C-1 (13 мм)	75	KE1143D ●	KE1133D ●	
 C-1 (13 мм)	75	KE1143B ●		

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

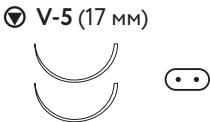
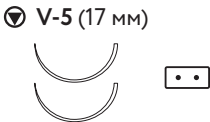
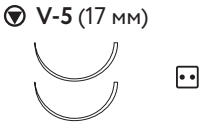
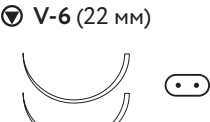
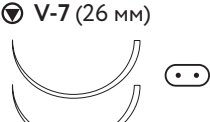
Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)				
		0 (M3,5)	2-0 (M3)	3-0 (M2)	4-0 (M1,5)	5-0 (M1)
 V-5 (17 мм)	75		KS9463D ○			
	75		KE9463D ●			
	90		KS9464D ○		KS9444D ○	
	90		KE9464D ●	KE9454D ●	KE9444D ●	KE9434D ●
 V-6 (22 мм)	75		KS9563D ○			
	75		KE9563D ●			
 V-7 (26 мм)	75		KS9663D ○			
	75		KE9663D ●	KE9653D ●		
	90		KS9664D ○			
	90	KE9674D ●	KE9664D ●	KE9654D ●		
 V-34 (36 мм)	90		KE8964D ●			

* В таблицах указаны коды шовного материала КЛЕОБОНД XL с покрытием из полибутилата. Для заказа шовного материала КЛЕОБОНД XL с покрытием из этилцеллюлозы следует заменить KE на KH, KS на KJ.

● – зеленая нить ○ – белая нить

 – прокладка PTFE 6x3 мм

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)		
		0 (M3,5)	2-0 (M3)	3-0 (M2)
 <p>▼ V-5 (17 мм)</p>	75		KS9463A ○	
	75		KE9463A ●	
	90		KS9464A ○	
	90		KE9464A ●	
 <p>▼ V-5 (17 мм)</p>	75		KS9463B ○	
	75		KE9463B ●	
	90		KS9464B ○	
	90		KE9464B ●	
 <p>▼ V-5 (17 мм)</p>	75		KS9463C ○	
	75		KE9463C ●	
 <p>▼ V-6 (22 мм)</p>	75		KS9563A ○	
	75		KE9563A ●	
 <p>▼ V-7 (26 мм)</p>	75		KS9663A ○	
	75		KE9663A ●	
	90		KS9664A ○	
	90		KE9664A ●	

* В таблицах указаны коды шовного материала КЛЕОБОНД XL с покрытием из полибутилата. Для заказа шовного материала КЛЕОБОНД XL с покрытием из этилцеллюлозы следует заменить KE на KH, KS на KJ.

○ – овальная прокладка PTFE 6×3 мм

□ – прокладка PTFE 6×3 мм

■ – прокладка PTFE 3×3 мм

● – зеленая нить ○ – белая нить

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)		
		0 (M3,5)	2-0 (M3)	3-0 (M2)
 V-7 (26 мм)	75		KS9663B ○	
	75		KE9663B ●	
	90		KE9664B ●	

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)		
		2 (M5)	1 (M4)	0 (M3,5)
 OS-4 (22 мм)	75		KE5183 ●	

РЕЖУЩАЯ ПРЯМАЯ ИГЛА

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)		
		0 (M3,5)	2-0 (M3)	3-0 (M2)
 KS (60 мм)	75		KE3863 ●	

* В таблицах указаны коды шовного материала КЛЕОБОНД XL с покрытием из полибутилата. Для заказа шовного материала КЛЕОБОНД XL с покрытием из этилцеллюлозы следует заменить KE на KH, KS на KJ.

 – прокладка PTFE 6×3 мм

● – зеленая нить ○ – белая нить

БЕЗ ИГЛЫ (ЛИГАТУРА)

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)							
		2 (M5)	1 (M4)	0 (M3,5)	2-0 (M3)	3-0 (M2)	4-0 (M1,5)	5-0 (M1)	6-0 (M0,7)
БЕЗ ИГЛЫ	45	KE0090 ●	KE0080 ●	KE0070 ●	KE0060 ●	KE0050 ●	KE0040 ●	KE0030 ●	KE0020 ●
	60	KE0091 ●	KE0081 ●	KE0071 ●	KE0061 ●	KE0051 ●	KE0041 ●	KE0031 ●	KE0021 ●
	70	KE0092 ●	KE0082 ●	KE0072 ●	KE0062 ●	KE0052 ●	KE0042 ●	KE0032 ●	KE0022 ●
	75	KE0093 ●	KE0083 ●	KE0073 ●	KE0063 ●	KE0053 ●	KE0043 ●	KE0033 ●	KE0023 ●
	90	KE0094 ●	KE0084 ●	KE0074 ●	KE0064 ●	KE0054 ●	KE0044 ●	KE0034 ●	KE0024 ●
	150	KE0097 ●	KE0087 ●	KE0077 ●	KE0067 ●	KE0057 ●	KE0047 ●	KE0037 ●	KE0027 ●
	180	KE0098 ●	KE0088 ●	KE0078 ●	KE0068 ●	KE0058 ●	KE0048 ●	KE0038 ●	KE0028 ●
	250	KE0099 ●	KE0089 ●	KE0079 ●	KE0069 ●	KE0059 ●	KE0049 ●	KE0039 ●	KE0029 ●

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)							
		2 (M5)	1 (M4)	0 (M3,5)	2-0 (M3)	3-0 (M2)	4-0 (M1,5)	5-0 (M1)	6-0 (M0,7)
БЕЗ ИГЛЫ	45	KS0090 ○	KS0080 ○	KS0070 ○	KS0060 ○	KS0050 ○	KS0040 ○	KS0030 ○	KS0020 ○
	60	KS0091 ○	KS0081 ○	KS0071 ○	KS0061 ○	KS0051 ○	KS0041 ○	KS0031 ○	KS0021 ○
	70	KS0092 ○	KS0082 ○	KS0072 ○	KS0062 ○	KS0052 ○	KS0042 ○	KS0032 ○	KS0022 ○
	75	KS0093 ○	KS0083 ○	KS0073 ○	KS0063 ○	KS0053 ○	KS0043 ○	KS0033 ○	KS0023 ○
	90	KS0094 ○	KS0084 ○	KS0074 ○	KS0064 ○	KS0054 ○	KS0044 ○	KS0034 ○	KS0024 ○
	150	KS0097 ○	KS0087 ○	KS0077 ○	KS0067 ○	KS0057 ○	KS0047 ○	KS0037 ○	KS0027 ○
	180	KS0098 ○	KS0088 ○	KS0078 ○	KS0068 ○	KS0058 ○	KS0048 ○	KS0038 ○	KS0028 ○
	250	KS0099 ○	KS0089 ○	KS0079 ○	KS0069 ○	KS0059 ○	KS0049 ○	KS0039 ○	KS0029 ○

* В таблицах указаны коды шовного материала КЛЕОБОНД XL с покрытием из полибутилата. Для заказа шовного материала КЛЕОБОНД XL с покрытием из этилцеллюлозы следует заменить KE на KH, KS на KJ.

● – зеленая нить ○ – белая нить

КЛЕОЛОН




Полиамид 6.6 с покрытием (воск)

Синтетический
нерассасывающийся плетённый
шовный материал

КЛЕОЛОН – синтетический нерассасывающийся плетённый хирургический шовный материал из полиамида 6.6 с покрытием из воска. Покрытие придает шовному материалу гладкую однородную поверхность, облегчает прохождение через ткани и повышает манипуляционные свойства.

Шовный материал КЛЕОЛОН является нерассасывающимся, но в связи с постепенной потерей прочности, которая происходит при длительном периоде нахождения шовного материала в организме, шовный материал КЛЕОЛОН не следует применять там, где требуется постоянное поддержание прочности на разрыв.

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)		
		1 (M4)	2-0 (M3)	3-0 (M2)
 Ⓞ RB-1 (17 мм)	35			KN6656 ●
	75			KN6653 ●
 Ⓞ SH (26 мм)	75		KN7263 ●	
 Ⓞ MO-5 (31 мм)	75	KN4883 ●		

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)		
		2 (M5)	1 (M4)	0 (M3,5)
 Ⓞ V-37 (40 мм)	100		KN9085 ●	

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ


Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)		
		2 (M5)	1 (M4)	0 (M3,5)
 ▼ OS-4 (22 мм)	75		KN5183 ●	

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)		
		0 (M3,5)	2-0 (M3)	3-0 (M2)
 ▼ PS (26 мм)	45		KN6160 ●	

● – черная нить

РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)		
		0 (M3,5)	2-0 (M3)	3-0 (M2)
▲ PC-26 (26 мм) 	45		KN5760 ●	

РЕЖУЩАЯ ПРЯМАЯ ИГЛА

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)		
		0 (M3,5)	2-0 (M3)	3-0 (M2)
▲ KS-55 (55 мм) 	100		KN3965 ●	

БЕЗ ИГЛЫ (ЛИГАТУРА)

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)			
		1 (M4)	0 (M3,5)	2-0 (M3)	3-0 (M2)
БЕЗ ИГЛЫ	45	KN0080 ●	KN0070 ●	KN0060 ●	KN0050 ●
	60	KN0081 ●	KN0071 ●	KN0061 ●	KN0051 ●
	70	KN0082 ●	KN0072 ●	KN0062 ●	KN0052 ●
	2x70	KN0086 ●	KN0076 ●	KN0066 ●	KN0056 ●
	75	KN0083 ●	KN0073 ●	KN0063 ●	KN0053 ●
	90	KN0084 ●	KN0074 ●	KN0064 ●	KN0054 ●
	180	KN0088 ●	KN0078 ●	KN0068 ●	KN0058 ●
	250	KN0089 ●	KN0079 ●	KN0069 ●	KN0059 ●

● – черная нить

КЛЕОПРО

Полипропилен

Синтетический
нерассасывающийся
монофиламентный шовный
материал

КЛЕОПРО – синтетический нерассасывающийся монофиламентный хирургический шовный материал из полипропилена. Шовный материал КЛЕОПРО обеспечивает постоянную прочность на разрыв и вызывает минимальную тканевую реакцию.

ЧЕРНЫЕ ИГЛЫ



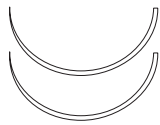




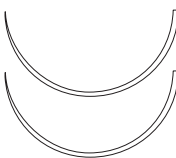










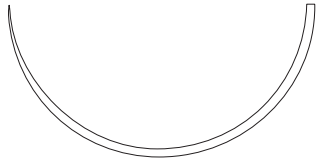

Шовный материал КЛЕОПРО может поставляться с хирургическими иглами черного цвета для лучшей видимости без бликов в операционном поле.

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)					
		2-0 (M3)	3-0 (M2)	4-0 (M1,5)	5-0 (M1)	6-0 (M0,7)	7-0 (M0,5)
☉ TF-6 (6,5 мм) 	30					● KP7126	● KP7116
☉ TF-6 (6,5 мм) 	45					● KP7120D	● KP7110D
☉ TF-1 (10 мм) 	75					● KP8123D	
☉ RB-2 (13 мм) 	75				● KP6833D	● KP6823D	
☉ RB-2 (13 мм) BLACK 	75				● KP6833D		
☉ RB-1 (17 мм) 	75			● KP6643			
☉ RB-1 (17 мм) 	75				● KP6633D		
	90		● KP6654D	● KP6644D	● KP6634D		
☉ RB-1 (17 мм) BLACK 	90			● KP6644D	● KP6634D		
☉ SH-2 (20 мм) 	90			● KP7644D			
☉ SH-2 (20 мм) BLACK 	90			● KP7644D			
☉ SH-1 (22 мм) 	75		● KP7453				
☉ SH-1 (22 мм) 	90				● KP7434D		
☉ SH (26 мм) 	75	● KP7263D	● KP7253D				
	90		● KP7254D	● KP7244D	● KP7234D		
	120		● KP7257D				
☉ SH (26 мм) BLACK 	90		● KP7254D	● KP7244D			






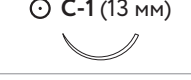


● – СИНЯЯ НИТЬ

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)					
		2 (M5)	1 (M4)	0 (M3,5)	2-0 (M3)	3-0 (M2)	4-0 (M1,5)
☉ МН-1 (31 мм) 	75				KP4463 		
☉ МН-1 (31 мм) 	90				KP4464D 	KP4454D 	
☉ МН (36 мм) 	75				KP4363 		
☉ МН (36 мм) 	75				KP4363D 		
	90			KP4374D 	KP4364D 		
☉ МО-5 (31 мм) 	100			KP4875 			
☉ МО-2 (40 мм) 	100			KP4675 			
☉ СТ (40 мм) 	75	KP2893 					
	100		KP2885 				
☉ ТР-1 (65 мм) 	100		KP8285 				

● – СИНЯЯ НИТЬ

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ







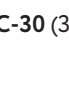

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)			
		5-0 (M1)	6-0 (M0,7)	7-0 (M0,5)	8/0 (M0,4)
 BV175-6 (8 мм)	60			KP0911D ●	KP0901D ●
 BV175-6 (8 мм) BLACK	60			KPB0911D ●	KPB0901D ●
 BV-1 (9,3 мм)	60		KP0721D ●	KP0711D ●	
 BV-1 (9,3 мм) BLACK	60		KPB0721D ●	KPB0711D ●	
 BV (11 мм)	60		KP0621D ●		
 C-1 (13 мм)	75	KP1133 ●			
 C-1 (13 мм)	60		KP1121D ●	KP1111D ●	
	75		KP1123D ●		
	90		KP1124D ●		
 C-1 (13 мм) BLACK	60	KPB1131D ●	KPB1121D ●		
	75		KPB1123D ●		

КОЛЮЩАЯ ПРЯМАЯ ИГЛА

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)		
		0 (M3,5)	2-0 (M3)	3-0 (M2)
 ST-70 (70 мм)	75		KP7863D ●	























● – синяя нить

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА С У ЗАТОЧКОЙ, 1/2 ОКРУЖНОСТИ







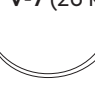





Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)					
		2-0 (M3)	3-0 (M2)	4-0 (M1,5)	5-0 (M1)	6-0 (M0,7)	7-0 (M0,5)
 <p>☑ CC-5 (11 мм)</p>	60				KP2331D ●		
 <p>☑ CC-6 (12 мм) BLACK</p>	60					KPB2411D ●	
 <p>☑ CC-4 (13 мм)</p>	60				KP2131D ●	KP2121D ●	
	75			KP2143D ●	KP2133D ●		
 <p>☑ CC-16 (16 мм)</p>	90		KP1754D ●	KP1744D ●	KP1734D ●		
 <p>☑ CC-20 (20 мм)</p>	90			KP1844D ●			
 <p>☑ CC-25 (26 мм)</p>	90	KP1964D ●	KP1954D ●	KP1944D ●			
 <p>☑ CC-30 (31 мм)</p>	90	KP2064D ●	KP2054D ●				
 <p>☑ CC-40 (40 мм)</p>	90	KP2264D ●	KP2254D ●				

● – СИНЯЯ НИТЬ

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА С У ЗАТОЧКОЙ, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)			
		5-0 (M1)	6-0 (M0,7)	7-0 (M0,5)	8-0 (M0,4)
 CC175-6 (8 мм)	60				KP9901D 
 CC (9,3 мм)	60	KP1331D 	KP1321D 	KP1311D 	KP1301D 
	75		KP1323D 		
	2x75		KP1328D 		
 CC (9,3 мм) BLACK	60			KPB1311D 	KPB1301D 
	75		KPB1323D 		
 CC-11 (11 мм)	60		KP1621D 	KP1611D 	
 CC-1 (13 мм)	60		KP1521D 	KP1511D 	
	75	KP1533D 	KP1523D 		
	2x75		KP1528D 		

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ












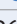







Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)				
		0 (M3,5)	2-0 (M3)	3-0 (M2)	4-0 (M1,5)	5-0 (M1)
 V-5 (17 мм)	90		KP9464D 	KP9454D 	KP9444D 	
 V-6 (22 мм)	75					KP9533D 
 V-7 (26 мм)	90		KP9664D 	KP9654D 		KP9634D 
 V-34 (36 мм)	100	KP8975 				

 – синяя нить

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)		
		1 (M4)	0 (M3,5)	2-0 (M3)
▼ CP (40 мм) 	100		KP2575 	

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ






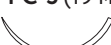






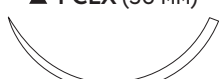

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)				
		2-0 (M3)	3-0 (M2)	4-0 (M1,5)	5-0 (M1)	6-0 (M0,7)
▼ P-1 (11 мм) 	45					KP5220 
▼ P-3 (13 мм) 	45				KP5330 	KP5320 
▼ PS-3 (16 мм) 	45			KP6440 	KP6430 	
▼ PS-2 (19 мм) 	45			KP6340 		
▼ PS-1 (24 мм) 	60		KP6251 			
	75		KP6253 			
▼ PS (26 мм) 	45	KP6160 	KP6150 			
▼ FSL (30 мм) 	75	KP3663 	KP3653 			

● – СИНЯЯ НИТЬ

РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)		
		2-0 (M3)	3-0 (M2)	4-0 (M1,5)
▲ PC-22 (22 мм) 	45		KP5650 	

РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)			
		3-0 (M2)	4-0 (M1,5)	5-0 (M1)	6-0 (M0,7)
▲ PC-3 (16 мм) 	45	KP5850 	KP5840 	KP5830 	KP5820 
▲ PC-5 (19 мм) 	45	KP5950 	KP5940 	KP5930 	
▲ PC-26 (26 мм) 	45	KP5750 	KP5740 		
▲ PCLX (36 мм) 	75	KP6053 			

РЕЖУЩАЯ ПРЯМАЯ ИГЛА













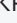
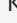












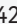

























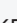
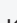

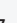
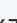














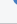






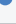

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)		
		0 (M3,5)	2-0 (M3)	3-0 (M2)
▲ KS (60 мм) 	75		KP3863 	KP3853 
▲ KS-75 (75 мм) 	100	KP4075 		

● – синяя нить

ТУПОКОНЕЧНАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)		
		2 (M5)	1 (M4)	0 (M3,5)
 <p>О СТВ (40 мм)</p>	100		KP3285 	

БЕЗ ИГЛЫ (ЛИГАТУРА)

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити, USP (метрический размер)									
		2 (M5)	1 (M4)	0 (M3,5)	2-0 (M3)	3-0 (M2)	4-0 (M1,5)	5-0 (M1)	6-0 (M0,7)	7-0 (M0,5)	8-0 (M0,4)
БЕЗ ИГЛЫ	45	KP0090 	KP0080 	KP0070 	KP0060 	KP0050 	KP0040 	KP0030 	KP0020 	KP0010 	KP0000 
	60	KP0091 	KP0081 	KP0071 	KP0061 	KP0051 	KP0041 	KP0031 	KP0021 	KP0011 	KP0001 
	70	KP0092 	KP0082 	KP0072 	KP0062 	KP0052 	KP0042 	KP0032 	KP0022 	KP0012 	KP0002 
	75	KP0093 	KP0083 	KP0073 	KP0063 	KP0053 	KP0043 	KP0033 	KP0023 	KP0013 	KP0003 
	90	KP0094 	KP0084 	KP0074 	KP0064 	KP0054 	KP0044 	KP0034 	KP0024 	KP0014 	KP0004 
	150	KP0097 	KP0087 	KP0077 	KP0067 	KP0057 	KP0047 	KP0037 	KP0027 	KP0017 	KP0007 
	180	KP0098 	KP0088 	KP0078 	KP0068 	KP0058 	KP0048 	KP0038 	KP0028 	KP0018 	KP0008 
	250	KP0099 	KP0089 	KP0079 	KP0069 	KP0059 	KP0049 	KP0039 	KP0029 	KP0019 	KP0009 

 – синяя нить

ХАРАКТЕР ПРОКАЛЫВАНИЯ ИГЛЫ

- ⊙ Колющая игла
- ⊙ Колюще-режущая игла с Y заточкой
- ⊙ Колюще-режущая игла
- ▼ Обратно-режущая игла
- ▲ Режущая игла
- Тупоконечная игла

8 (383) 363 97 62

8 (383) 363 97 21

630090, г. Новосибирск,

ул. Инженерная, 18

suture@angioline.ru

